



## Universal Securement Device

REF	Description
3100ESH	Extra Small Hydrocolloid Securement
3200SH	Small Hydrocolloid Securement



STERILE R

LV07904 Rev 1



Zefon International, Inc.  
5350 SW 1st Lane  
Ocala, FL 34474 USA

Phone: +1 352 854 8080  
Fax: +1 352 854 7480  
www.zefon.com

EC REP

Blue Box Medical Limited  
Unit 29, New Forest Enterprise Centre,  
Rushington Business Park  
Chapel Lane  
Totton, Southampton, SO40 9LA

Phone: +023 8066 9000  
Fax: +023 8066 9002  
www.blueboxmedical.co.uk

Grip-Lok is a registered trademark of Zefon International.

## INSTRUCTIONS


English

1. Select the correct size Grip-Lok for your application.

REF	Size	Line/Tubing Diameter
3100ESH	Extra Small	1 to 3 mm
3200SH	Small	1.5 to 4.5 mm

2. Select the area for the placement of the Grip-Lok. Note: The line or tube should be already inserted in the patient.
3. Prepare the skin according to the standard hospital protocol for dressing application. Hair removal may be required on some patients for better adhesion.
4. Remove the liner from the bottom of the Grip-Lok by lifting from the center.
5. Place the Grip-Lok back onto the liner with one half extending over the edge. This provides an easy way to hold and apply to the skin.
6. Open the top flap, remove the interior liner and hold the flap open.
7. Slide the Grip-Lok under so that the line or tube is in the center of the exposed adhesive.
8. Secure the top flap over the line or tube.
9. Hold the Grip-Lok in position on the skin while removing the bottom liner. Apply gentle pressure to the center fabric area over the adhesive.

Note: replace securement device if soiled or saturated in fluid.  
Note: use of a sterile water swab will ease removal of securement device from the skin.

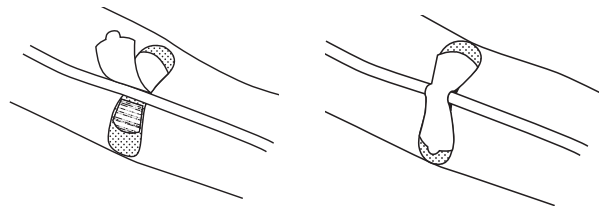

This product does not contain any natural rubber latex.



This product is indicated for single patient use.

## ISTRUZIONI

Italian


1. Selezionare il Grip-Lok delle dimensioni corrette per l'applicazione.

RIF	Dimensioni	Diametro linea/tubo
3100ESH	Extra Small (molto piccola)	1 - 3mm
3200SH	Small (piccola)	1.5 - 4.5mm

2. Selezionare l'area di posizionamento del Grip-Lok. Nota: la linea o il tubo devono essere già inseriti al paziente.
3. Preparare la cute seguendo il protocollo ospedaliero standard per l'applicazione delle medicazioni. In alcuni pazienti può rendersi necessaria la depilazione per una migliore adesione.
4. Rimuovere il rivestimento dalla parte inferiore del Grip-Lok sollevandolo dal centro.
5. Riposizionare il Grip-Lok sul rivestimento con una metà estesa sul bordo. Ciò costituisce un modo agevole per sostenerlo e applicarlo alla cute.
6. Aprire il lembo superiore, rimuovere il rivestimento interno e mantenere aperto il lembo.
7. Far scivolare il Grip-Lok nella parte sottostante, in modo che la linea o il tubo si trovino al centro dell'adesivo esposto.
8. Fissare il lembo superiore sulla linea o sul tubo.
9. Mantenere il Grip-Lok in posizione sulla cute durante la rimozione del rivestimento inferiore. Applicare una delicata pressione al centro dell'area in tessuto sopra l'adesivo.

Nota: sostituire il dispositivo di fissaggio qualora sia sporco o saturo di fluidi.

Nota: l'impiego di un tampono sterile imbevuto di acqua agevolerà la rimozione del dispositivo di fissaggio dalla cute.

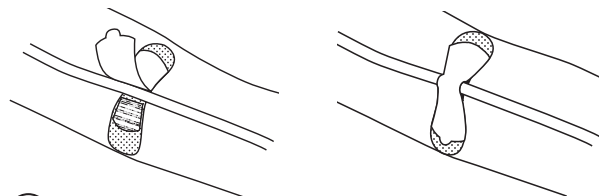

Questo prodotto non contiene lattice di gomma naturale.



Questo prodotto è indicato per l'uso su un singolo paziente.

## GEBRAUCHSANLEITUNG

German


1. Für die jeweilige Anwendung die richtige Grip-Lok-Größe wählen.

REF	Größe	Schlauch/Sonden-Durchmesser
3100ESH	Extra klein	1 bis 3 mm
3200SH	Klein	1.5 bis 4.5 mm

2. Den Bereich auswählen, in dem der Grip-Lok angebracht werden soll. Hinweis: Der Schlauch oder die Sonde sollte bereits im Patienten eingeführt sein.
3. Die Haut entsprechend den Krankenhausstandardrichtlinien für Verbände vorbereiten. Bei einigen Patienten kann eine Haarentfernung für bessere Haftung notwendig sein.
4. Die Einlage vom Unterteil des Grip-Lok durch Abziehen von der Mitte entfernen.
5. Den Grip-Lok wieder so auf die Einlage platzieren, dass sich eine Hälfte über den Rand hinaus erstreckt. Auf diese Weise kann er leicht gefasst und auf der Haut appliziert werden.
6. Die obere Lasche öffnen, die innere Einlage entfernen und die Lasche geöffnet halten.
7. Den Grip-Lok unterschleiben, so dass der Schlauch oder die Sonde sich in der Mitte des freiliegenden Klebestreifens befindet.
8. Die obere Lasche über den Schlauch oder die Sonde kleben.
9. Den Grip-Lok in seiner Position auf der Haut festhalten und die untere Einlage entfernen. Sanften Druck auf den mittleren Klettverschluss über dem Klebestreifen ausüben.

Hinweis: Die Sicherungsvorrichtung ersetzen, wenn sie verschmutzt oder mit Flüssigkeit getränkt ist.

Hinweis: Die Entfernung der Sicherungsvorrichtung von der Haut wird durch einen Tupfer mit sterilem Wasser erleichtert.

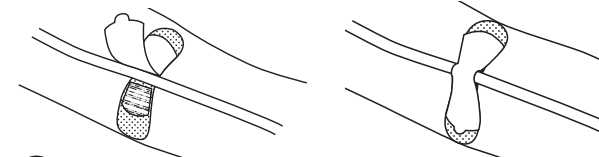

Dieses Produkt enthält kein Latex aus Naturkautschuk.



Dieses Produkt ist für den Gebrauch an nur einem Patienten bestimmt.

## INSTRUCTIES


Dutch

1. Kies een Grip-Lok van de juiste maat voor uw toepassing.

REF	Maat	Diameter lijn/sonde
3100ESH	Extra klein	1 tot 3mm
3200SH	Klein	1.5 tot 4.5mm

2. Kies een regio voor plaatsing van de Grip-Lok. Opmerking: de lijn of sonde moet al in het lichaam van de patiënt zijn ingebracht.
3. Preparere de huid volgens het standaard klinisch protocol voor het aanbrengen van verbandmiddelen. Bij sommige patiënten kan ontharing noodzakelijk zijn om de adhesie te verbeteren.
4. Verwijder de dekstrip van de onderkant van de Grip-Lok door deze vanuit het midden op te lichten.
5. Plaats de Grip-Lok op de dekstrip terug, zodanig dat één helft ervan over de rand uitsteekt. Dit verschaft een gemakkelijke manier om de huid vast te houden en de pleister erop aan te brengen.
6. Open het bovenste lipje, verwijder de binnenste dekstrip en houd het lipje geopend.
7. Schuif de Grip-Lok onder de lijn of sonde, zodanig dat de lijn of sonde in het midden van het blootgelegde kleefvlak ligt.
8. Plak het bovenste lipje over de lijn of sonde.
9. Houd de Grip-Lok in positie op de huid terwijl u de onderste dekstrip verwijdert. Oefen lichte druk uit op het middelste stuk klittenband op het kleefvlak.

Opmerking: vervang de bevestigingspleister als hij vuil of doornat wordt.  
Opmerking: het verwijderen van de bevestigingspleister van de huid wordt vergemakkelijkt door het gebruik van een steriel gaasje met water.

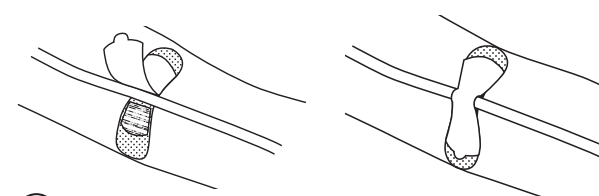

Dit product bevat geen natuurlijke rubberlatex.



Dit product is bestemd voor eenmalig gebruik.

## MODE D'EMPLOI

French


1. Choisir la taille de Grip-Lok appropriée pour l'application.

REF	Taille	Diamètre de la tubulure/ligne
3100ESH	Très petit	1 à 3mm
3200SH	Petit	1,5 à 4,5mm

2. Choisir la zone de mise en place du Grip-Lok. Remarque : la tubulure ou la ligne doivent avoir été insérées au préalable dans le patient.
3. Préparer la peau selon le protocole standard de pansement de l'hôpital. Un rasage peut être nécessaire chez certains patients pour assurer une meilleure adhérence.
4. Retirer le film situé sur le fond du Grip-Lok en le soulevant par le centre.
5. Remplacer le Grip-Lok au dos du film en faisant dépasser une moitié du bord. Cela permet de le tenir et de l'appliquer facilement sur la peau.
6. Ouvrir le rabat supérieur, retirer le film intérieur et garder le rabat ouvert.
7. Faire glisser le Grip-Lok en dessous de sorte que la ligne ou la tubulure est centrée sur la surface adhésive.
8. Fixer le rabat supérieur sur la ligne ou la tubulure.
9. Maintenir le Grip-Lok en position sur la peau tout en retirant le film inférieur. Appuyer légèrement au centre de la partie en tissu sur la surface adhésive.

Remarque : remplacer le dispositif de fixation s'il est sale ou saturé de liquide.

Remarque : utiliser un tampon imbibé d'eau stérilisée pour faciliter le retrait du dispositif de fixation sur la peau.

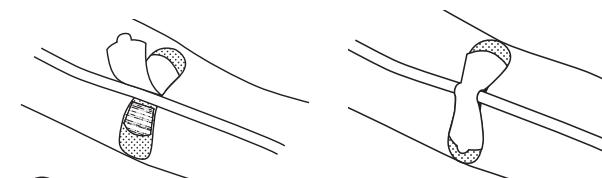

Ce produit est exempt de latex de caoutchouc naturel.



Ce produit est réservé à une utilisation chez un seul patient.

## BRUKSANVISNING


Swedish

1. Välj ut en Grip-Lok av passande storlek för ändamålet.

REF	Taille	Diamètre de la tubulure/ligne
3100ESH	Extra liten	1 till 3mm
3200SH	Liten	1.5 till 4.5mm

2. Välj ut platsen där Grip-Lok ska sättas. Obs! Ledningen eller slangen ska redan vara inlagd i patienten.
3. Preparera huden enligt sjukhusets standardrutiner för applicering av förband. På vissa patienter krävs hårborttagning för att förbättra vidhäftningsförmågan.
4. Ta bort skyddspapperet från Grip-Loks undersida genom att lyfta från mitten.
5. Sätt tillbaka Grip-Lok på skyddspapperet så att den ena hälften skjuter ut över kanten. På detta sätt är det lätt att hålla i och sätta fast den på huden.
6. Öppna toppfliken, ta bort det inre skyddspapperet och håll fliken öppen.
7. Skjut in Grip-Lok undertill, så att slangen eller ledningen är mitt på den exponerade fästytan.
8. Sätt fast toppfliken över ledningen eller slangen.
9. Håll Grip-Lok på plats på huden medan du tar bort det undre skyddspapperet. Tryck varligt på textilområdet i mitten över fästytan.

Obs! Byt ut fästansordningen om den blir smutsig eller blöts ned.  
Obs! För att underlätta borttagning av fästansordningen från huden kan en sudd indränkt med sterilt vatten användas.

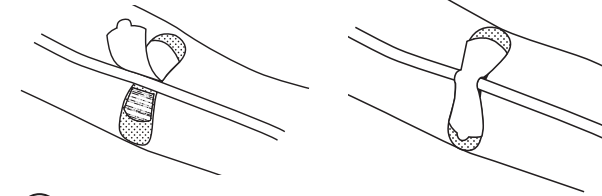

Denna produkt innehåller inget naturligt gummilatex.



Denna produkt är endast avsedd för användning på en patient.

## INSTRUCCIONES


Spanish


- Seleccione** el tamaño de Grip-Lok correcto para su aplicación.

REF	Tamaño	Diámetro de la vía o sonda
3100ESH	Extra pequeño	1 a 3mm
3200SH	Pequeño	1.5 a 4.5mm

- Seleccione** la zona donde se ha de colocar el Grip-Lok. Nota: La vía o la sonda ya debe estar insertada en el paciente.
- Prepáre** la piel de acuerdo con el protocolo habitual del hospital para la colocación de apósitos. En algunos pacientes puede ser necesario eliminar el vello para mejorar la adhesión.
- Retire** la lámina protectora de la parte inferior del Grip-Lok levantándola desde el centro.
- Coloque** la parte posterior del Grip-Lok sobre la lámina protectora extendiendo una mitad sobre el borde. Esto proporciona una forma fácil de sujetar y aplicar a la piel.
- Abra** la solapa superior, retire la lámina protectora interior y mantenga la solapa abierta.
- Deslice** el Grip-Lok por debajo de modo que la vía o la sonda esté en el centro del adhesivo expuesto.
- Fije** la solapa superior sobre la vía o la sonda.
- Sujete** el Grip-Lok en la posición deseada en la piel mientras retira la lámina protectora inferior. Presione suavemente en el centro de la zona de tela sobre el adhesivo.

**Nota:** reemplace el dispositivo de fijación si está sucio o empapado en líquido.  
**Nota:** el uso de un algodón mojado en agua estéril facilitará la eliminación del dispositivo de fijación de la piel.

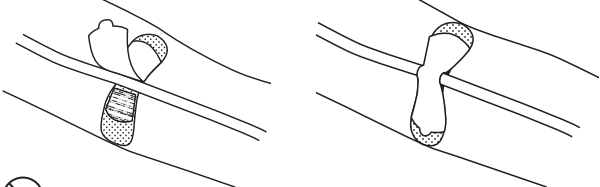

 Este producto no contiene ningún tipo de goma látex natural.

 Este producto está indicado para uso individual.

## ANVISNINGER


Danish

- Vælg** korrekt størrelse Grip-Lok bandage til opgaven.

REF	Størrelse	slange/rørdiameter
3100ESH	Ekstra lille	1 to 3mm
3200SH	Lille	1.5 to 4.5mm

- Vælg** området til placering af Grip-Lok. Bemærk: Røret eller slangen skal være indsat på patienten i forvejen.
- Klargør** huden i henhold til almindelig hospitalsprotokol for anlæggelse af forbinding. Hårfjernelse kan være nødvendig hos visse patienter, for at bandagen kan hæfte.
- Aftag** det nederste afdækningsstykke fra bunden af Grip-Lok ved at løfte op fra midten.
- Placer** Grip-Lok-bagsiden på afdækningen, så den ene halvdel rækker ud over kanten. Dermed er det nemt at holde den og sætte den på huden.
- Åbn** den øverste flap, aftag den indvendige afdækning og hold flappen åben.
- Skub** Grip-Lok ind under, så røret eller slangen er midt på det afdækkede klæbestykke.
- Fastgør** øverste flap over røret eller slangen.
- Hold** Grip-Lok på plads på huden, mens nederste afdækning fjernes. Påfør et let tryk midt på burrestofområdet over klæbestykket.

**Bemærk:** Udskift fastgøringen, hvis den er snavset eller mættet med væske.  
**Bemærk:** Brug af en steril vatpind letter adskillelsen af fastgørelsen fra huden.

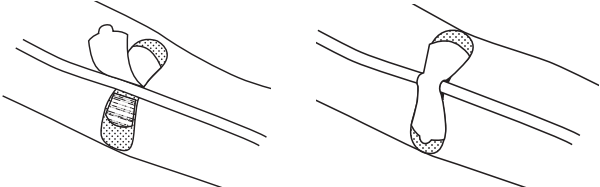

 Dette produkt indeholder ikke naturgummlatex.

 Dette produkt er kun beregnet til brug på en enkelt patient.

## INSTRUÇÕES


Portugese

- Seleccione** o tamanho correcto do Grip-Lok para a sua aplicação.


REF	Tamanho	Diâmetro do revestimento/tubo
3100ESH	Extra pequeno	1 a 3mm
3200SH	Pequeno	1.5 a 4.5mm

- Seleccione** a área de colocação do Grip-Lok. Nota: O tubo já deve estar inserido no doente.
- Prepáre** a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação de pensos. Em alguns doentes, pode ser necessária a remoção de pêlos para uma melhor aderência.
- Remova** o revestimento da parte inferior do Grip-Lok levantando a partir do centro.
- Coloque** o Grip-Lok novamente sobre o revestimento com uma das metades a estender-se sobre a margem. Isto proporciona uma forma fácil de o segurar e aplicar na pele.
- Abra** a dobra superior, remova o revestimento interior e mantenha a dobra aberta.
- Deslize** o Grip-Lok por baixo de modo a que o tubo fique no centro do adesivo exposto.
- Prenda** a dobra superior sobre o tubo.
- Segure** o Grip-Lok em posição contra a pele enquanto remove o revestimento inferior. Aplique uma pressão suave na área central de tecido sobre o adesivo.

**Nota:** substitua o dispositivo de fixação se estiver sujo ou impregnado de líquido.  
**Nota:** a utilização de um cotonete com água esterilizada facilitará a remoção do dispositivo de fixação da pele.

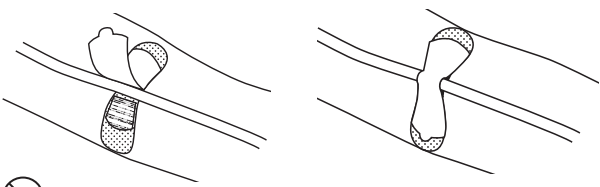

 Este produto não contém látex de borracha natural.

 Este produto está indicado para utilização num único doente.

## LEIÐBEININGAR

Icelandic


- Veljið** Grip-Lok í réttri stærð fyrir notkun.

TILV	Stærð	Leiðsla/Leggur Þvermál
3100ESH	Sérstaklega lítið	1til 3mm
3200SH	Lítið	1.5 til 4.5mm

- Veljið** svæðið fyrir staðsetningu Grip-Lok. Athugið: Leiðslunni eða leggnum ætti þegar að vera komið fyrir í sjúklingnum.
- Undirbúið** húðina samkvæmt stöðluðum reglum sjúkráðsins um umbúðir. Það getur þurft að fjarlægja hár af sumum sjúklingum til að fá betri viðlöðun.
- Fjarlægjið** plastið að neðan á Grip-Lok með því að lyfta því af frá miðju.
- Setjið** Grip-Lok plásturinn aftur á plastið þannig að einn helmingurinn standi út fyrir brúnina. Þetta gerir að verkum að auðveldari verður að halda honum og setja hann á húðina.
- Lyftið** efri flípanum, fjarlægjið innri plastið og haldið flípanum opnum.
- Smevgið** Grip-Lok undir þannig að leiðslan eða leggurinn er í miðjunni á límræmunni.
- Festið** efri flípanum fyrir ofan leiðsluna eða leggnum.
- Haldið** Grip-Lok í réttri stöðu á húðinni á meðan verið er að fjarlægja neðri plastið. Þrýstið varlega á plástursmiðjuna fyrir ofan límsvæðið.

**Athugið:** skiptið um plástur ef hann er skítugur eða blautur í gegn.  
**Athugið:** með því að nota dauðhreinsaða þveгла er auðveldara að fjarlægja plástrana af húðinni.



 Þessi vara inniheldur ekkert náttúrulegt gúmmilatex.

 Þessi vara er áætluð fyrir notkun á einum sjúklingi.

## ΟΔΗΓΙΕΣ


Greek


- Επιλέξτε** Grip-Lok κατάλληλου μεγέθους για την εφαρμογή σας.

ΑΡ. ΚΑΤ.	Μέγεθος	Διάμετρος γραμμής/σωλήνωσης
3100ESH	Πολύ μικρό	1 - 3mm 1 έως 3mm
3200SH	Μικρό	1.5mm 4.5 έως 4.5mm

- Επιλέξτε** την περιοχή τοποθέτησης του Grip-Lok. Σημείωση: Η γραμμή ή ο σωλήνας θα πρέπει να έχει ήδη εισαχθεί στον ασθενή.
- Προετοιμάστε** το δέρμα σύμφωνα με το τυπικό πρωτόκολλο του νοσοκομείου περί εφαρμογής επιδέσμων. Ενδέχεται να απαιτείται αφαίρεση τριχών σε ορισμένους ασθενείς για καλύτερη προσκόλληση.
- Αφαιρέστε** την επένδυση από το κάτω μέρος του Grip-Lok ανασκλώνοντάς το από το κέντρο.
- Τοποθετήστε** το Grip-Lok πάλι στην επένδυση με το μισό του τμήμα να προεξέχει από την άκρη. Έτσι, είναι ένας εύκολος τρόπος να το κρατήσετε και να το τοποθετήσετε στο δέρμα.
- Ανοίξτε** το άνω πτερύγιο, αφαιρέστε την εσωτερική επένδυση και κρατήστε το πτερύγιο ανοικτό.
- Σύρετε** το Grip-Lok από κάτω έτσι ώστε η γραμμή ή ο σωλήνας να βρίσκεται στο κέντρο του αυτοκόλλητου που έχει αποκαλυφθεί.
- Στερεώστε** το άνω πτερύγιο πάνω από τη γραμμή ή το σωλήνα.
- Κρατήστε** το Grip-Lok στη θέση του στο δέρμα ενώ αφαιρείτε την επένδυση του κάτω μέρους. Εφαρμόστε ήπια πίεση στο κέντρο της υφασμάτινης περιοχής πάνω από το αυτοκόλλητο.

**Σημείωση:** αντικαταστήστε τη διάταξη στερέωσης εάν υπάρχουν ακαθαρσίες ή έχει εμποτιστεί με υγρό.  
**Σημείωση:** η χρήση μάκτρου με στείρο νερό θα διευκολύνει την αφαίρεση της διάταξης στερέωσης από το δέρμα.

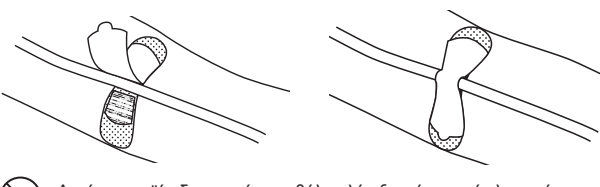

 Αυτό το προϊόν δεν περιέχει καθόλου λάτεξ από φυσικό ελαστικό καουτσούκ.

 Αυτό το προϊόν ενδείκνυται για χρήση σε ένα μόνον ασθενή.

## ANVISNINGER

Norwegian


- Velg** Grip-Lok av riktig størrelse for bruksområdet ditt.


REF	Størrelse	Lednings-/slangediameter
3100ESH	Ekstra liten	1 til 3mm
3200SH	Liten	1.5 til 4.5mm

- Velg** stedet der Grip-Lok skal settes på. Merk: Ernæringsledningen eller -slangen bør allerede være satt inn.
- Preparer** huden i henhold til standard sykehusprotokoll for påsetting av bandasje. Hårfjerning kan være påkrevd hos enkelte pasienter for å oppnå bedre feste.
- Fjern** strimmelen fra bunnen på Grip-Lok ved å løfte den fra midtpartiet.
- Sett** Grip-Lok tilbake på strimmelen med den ene halvdelen ut forbi kanten. Dette gjør det lettere å holde den og plassere den på huden.
- Åpne** den øverste fliken, fjern den innvendige strimmelen og hold fliken åpen.
- Skiv** Grip-Lok under slik at ledningen eller slangen befinner seg midt på den synlige klebeflatten.
- Fest** den øverste fliken over ledningen eller slangen.
- Hold** Grip-Lok på plass på huden mens du fjerner understrimmelen. Påfør forsiktig trykk på midtre del av stoffet over klebeflatten.

**Merk:** skift ut sikringsanordningen hvis den er smusset eller gjennombløt av væske.  
**Merk:** bruk av en steril vannvattpinne gjør det lettere å fjerne sikringsanordningen fra huden.



 Dette produktet inneholder ikke naturlig lateksgummi.

 Dette produktet skal brukes av kun én pasient.

## OHJEET

Finnish

- Valitse** toimenpiteeseen oikeankokoinen Grip-Lok.

VIITE	Koko	Putken/letkun läpimitta
3100ESH	Erittäin pieni	1 - 3mm
3200SH	Pieni	1.5 - 4.5mm

- Valitse** Grip-Lokin kiinnitysalue. Huomaa: Letkun tai putken tulee olla jo potilaassa.
- Valmistele** iho sairaalan sidosten asettamista koskevan standardin hoitoprotokollan mukaisesti. Karvojen poisto voi olla tarpeen joillakin potilailla, jotta sidos tarttuu paremmin.
- Poista** Grip-Lokin alapuolella oleva taustapaperi nostamalla keskiosasta.
- Aseta** Grip-Lok taustaperin päälle toisen puolen ulottuessa reunan yli. Näin laitteen paikoillaan pitäminen ja iholle kiinnittäminen helpottuu.
- Avaa** päälyspuolen liuska, poista sisäpuolen taustapaperi ja pidä liuskaa auki.
- Liu'uta** Grip-Lok alapuolelle siten, että putki tai letku on esillä olevan tarran keskellä.
- Kiinnitä** päälyspuolen liuska putken tai letkun päälle.
- Aseta** Grip-Lok paikalleen iholle poistaen samalla alapuolella oleva taustapaperi. Paina keyyesti tarran päällä olevaa kangasosan keskikohtaa.

**Huomaa:** Vaihda kiinnityslaite, jos se likaantuu tai jos siihen kerääntyy liikaa nestettä.  
**Huomaa:** Steriilillä vedellä kostutetut sidetaitokset helpottavat kiinnityslaitteen poistamista iholta.



 Tämä tuote ei sisällä luonnonkumilateksia.

 Tämä tuote on tarkoitettu potilaskohtaiseen käyttöön.

## INSTRUKCJA


Polish


- Wybrać** prawidłowy rozmiar mocowania Grip-Lok do założenia.

REF	Rozmiar	Średnica rurki/przewodu
3100ESH	Bardzo mała	1til 3mm
3200SH	Mała	1.5 til 4.5mm

- Wybrać** obszar, na którym umieszczone ma być mocowanie Grip-Lok. Uwaga: U pacjenta powinien już być założony przewód lub rurka.
- Przygotować** skórę zgodnie ze standardowym protokołem szpitalnym w celu założenia opatrunku. U niektórych pacjentów konieczne może być usunięcie włosów w celu zapewnienia lepszego przylegania.
- Usunąć** zabezpieczenie ze spodu mocowania Grip-Lok, unosząc je w kierunku od środka.
- Umieścić** mocowanie Grip-Lok z powrotem na zabezpieczeniu tak, aby w połowie wystawało z brzegu. Umożliwi to jego łatwe uchwycenie i naklejenie na skórę.
- Otworzyć** górne skrzydełko, usunąć wewnętrzne zabezpieczenie i przytrzymać otwarte skrzydełko.
- Wsunąć** mocowanie Grip-Lok pod spód, tak aby przewód lub rurka znalazły się pośrodku odsłoniętej powierzchni adhezyjnej.
- Przymocować** górne skrzydełko ponad przewodem lub rurką.
- Przytrzymać** mocowanie Grip-Lok w jego położeniu na skórze podczas usuwania spodniego zabezpieczenia. Lekko docisnąć do środka fragment z tkaniny nad powierzchnią adhezyjną.

**Uwaga:** Wymienić system mocowań, jeśli uległ zabrudzeniu lub nasiąknął płynem.  
**Uwaga:** Użycie sterylnego wacika nasączonego wodą ułatwi usunięcie systemu mocowań ze skóry.

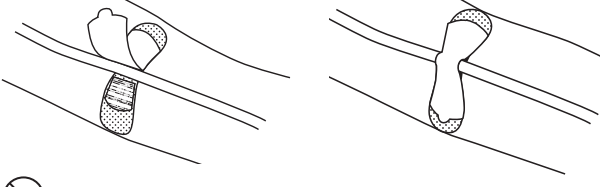

 Produkt ten nie zawiera naturalnej gumy lateksowej.

 Produkt ten jest przeznaczony do użyciu u jednego pacjenta.